



**SURSHIELD**

# VEILIGHEID IN EEN HANDOMDRAAI

BLOEDAFNAMESET MET VLEUGELNAALD EN SURSHIELD PROTECTOR




Dankzij het vernieuwend design kan de SURSHIELD protector onmiddellijk na het terugtrekken van de naald uit de ader met één hand over de naald aangebracht worden.

**TERUMO's** bloedafnameset met vleugelnaald en **SURSHIELD** protector biedt extra veiligheid voor verplegend personeel en patiënten.

We keep life flowing  
**TERUMO**<sup>®</sup>

## EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

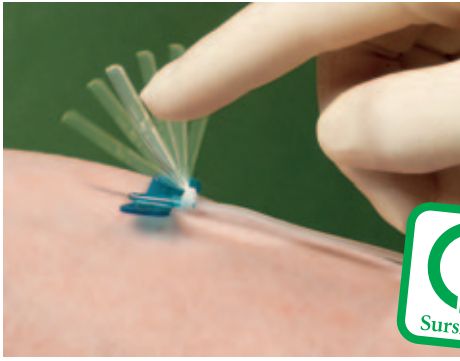


## Veiligheid in een handomdraai...

Dankzij zijn uniek design vermindert de SURSHIELD protector aanzienlijk het risico op prikverwondingen voor verplegend personeel en patiënten. Na het verwijderen van de naald uit de ader kan de SURSHIELD protector met één enkele handbeweging over de naald geplaatst worden. Het systeem is uiterst eenvoudig te gebruiken: een lichte drukk beweging volstaat om de protector te sluiten. Het klikgeluid tijdens het sluiten en het verschijnen van de naald in het inspectieraam geven aan dat de naald stevig, onomkeerbaar in de protector gevat zit. Terwijl de veiligheid voor de bloedafnemer


en de patiënt aanzienlijk verhoogd wordt, blijft de bloedafnametechniek ongewijzigd.

De duidelijk zichtbare, kleurgecodeerde vleugelnaald van de TERUMO bloedafnameset zorgt voor een extra stevige, betrouwbare grip waardoor de naald gemakkelijker in de ader ingebracht kan worden. Het gebruik van de TERUMO bloedafnameset met vleugelnaald helpt om voortreffelijke laboresultaten te bekomen. Dit dankzij de kwaliteit van de tubing die tijdens het gebruik niet krult noch verdraait. Voor de bloedafnameset met vleugelnaald wordt gebruik gemaakt van TERUMO's beproefde naaldtechnologie. De patiënt ervaart het inbrengen van de naald dan ook als zeer comfortabel en pijnloos.


## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

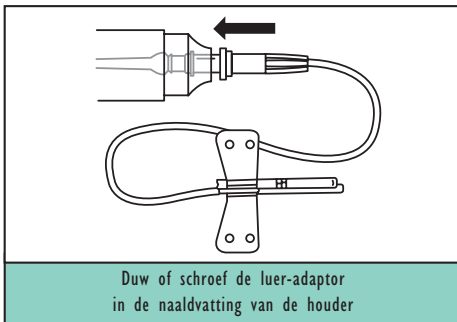


Duw of schroef de luer-adaptor in de naaldvatting van de houder

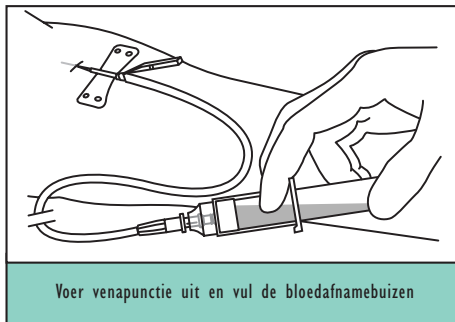


Voer venapunctie uit en vul de bloedafnamebuizen

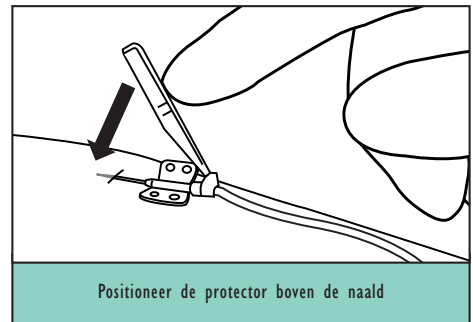


Positioneer de protector boven de naald

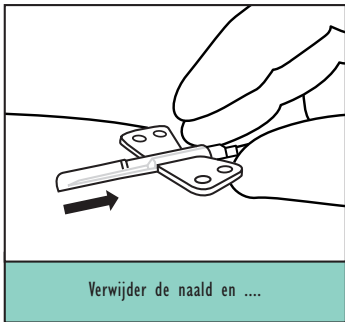


Verwijder de naald en ...

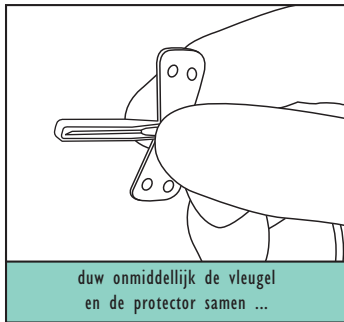

duw onmiddellijk de vleugel en de protector samen ...

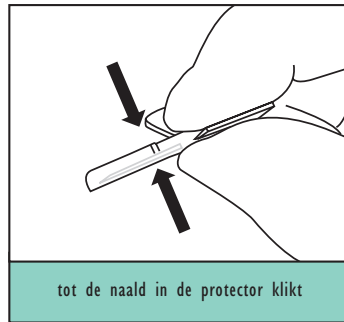

tot de naald in de protector klikt

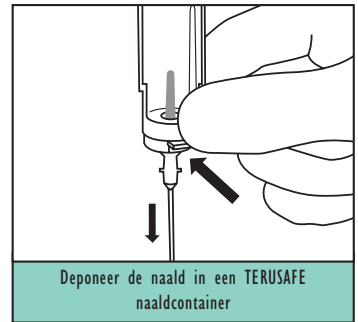

Deponeer de naald in een TERUSAFE naaldcontainer

## SURSHIELD REFERENTIES

CE 0123

*Alle biologische stalen en gebruikt afnamemateriaal, naalden in het bijzonder, dienen als mogelijk besmet beschouwd te worden en moeten steeds voorzichtig gehanteerd worden. Alle relevante instructies voor het gebruik alsook de leidraden en voorschriften van de organisatie waarvoor men werkt dienen nauwkeurig gevolgd te worden. Gebruikte naalden worden nooit opnieuw van een protector voorzien, maar verwijderd in speciaal ontworpen containers voor biologisch afval.*

ARTIKEL	TYPE	CODE	BESCHRIJVING	HOUDBAARHEIDSPERIODE	
	BAJONETVERBINDING	MN*SVS21BQ30	21G, 30 cm tubing	36 maanden	
		MN*SVS21BQ18	21G, 18 cm tubing	36 maanden	
		MN*SVS21BQ09	21G, 9 cm tubing	36 maanden	
			MN*SVS23BQ30	23G, 30 cm tubing	36 maanden
			MN*SVS23BQ18	23G, 18 cm tubing	36 maanden
			MN*SVS23BQ09	23G, 9 cm tubing	36 maanden
	SCHROEFVERBINDING		MN*SVS21BW30	21G, 30 cm tubing	36 maanden
			MN*SVS21BW18	21G, 18 cm tubing	36 maanden
			MN*SVS21BW09	21G, 9 cm tubing	36 maanden
			MN*SVS23BW30	23G, 30 cm tubing	36 maanden
			MN*SVS23BW18	23G, 18 cm tubing	36 maanden
			MN*SVS23BW09	23G, 9 cm tubing	36 maanden

Voor meer informatie, gelieve ons verkoopskantoor te contacteren.

TERUMO® is een geregistreerd handelsmerk van TERUMO CORPORATION  
SURSHIELD™ is een handelsmerk van TERUMO CORPORATION

TERUMO EUROPE N.V. • Researchpark Zone 2 Haasrode • Interleuvenlaan 40 • B-3001 Leuven • BELGIË  
Tel. +32/16.38.12.11 • Fax +32/16.40.02.49 • [www.terumo-europe.com](http://www.terumo-europe.com) • [www.terumo.com](http://www.terumo.com)

