



SURSHIELD

PROTEZIONE E SICUREZZA CON UN CLICK

SET PER PRELIEVO CON AGO A FARFALLA CON PROTETTORE SURSHIELD




Il design innovativo del protettore SURSHIELD permette una immediata protezione dell'ago appena estratto dalla vena del paziente.

Il set TERUMO per prelievo multiplo con ago a farfalla con protettore SURSHIELD, rappresenta un importante passo avanti nella riduzione dei rischi di contaminazione per il personale medico.

We keep life flowing
TERUMO[®]


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

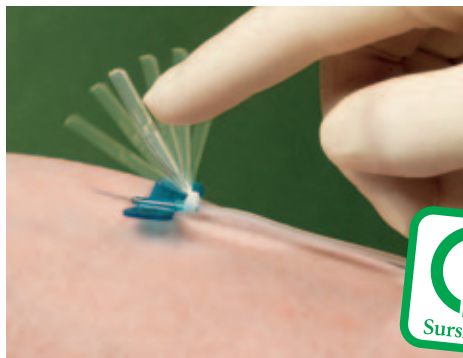


Protezione e sicurezza in un click...

Grazie all'esclusivo design, il protettore SURSHIELD riduce sensibilmente i rischi di punture accidentali al personale medico e ai pazienti. Un design estremamente funzionale fa sì che il dispositivo di protezione SURSHIELD possa essere facilmente posizionato in sede in maniera immediata dopo aver estratto l'ago dalla vena con un solo movimento della mano. È particolarmente facile da usare e per chiudere il dispositivo di protezione a scatto basta premere leggermente sino ad udire il tipico click d'innesto. Il suono del click in fase di chiusura e l'ago visibile nella finestrella di controllo indicano chiaramente la protezione irreversibile e la perfetta tenuta dell'ago. Se da una parte il dispositivo esalta in maniera considerevole le caratteristiche di sicurezza per il prelevatore e per il paziente, la tecnica di campionatura del sangue rimane invariata. Le alette in codice colore garantiscono una immediata identificazione delle dimensioni dell'ago. La presa salda e sicura delle alette offre una eccezionale maneggevolezza e facilità l'inserimento dell'ago nella vena. Nel settore medico professionale si può contare sull'ago a farfalla TERUMO per ottenere dei campioni ematici eccellenti, grazie anche al tubicino privo di effetto memoria. Per il paziente la venipuntura è confortevole poiché l'accesso alla vena è facile ed indolore grazie alla tecnologia TERUMO applicata all'ago.


ISTRUZIONI PER L'USO

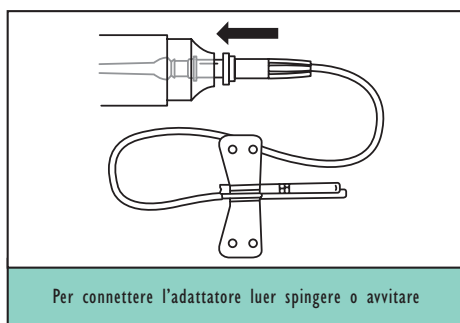

Per connettere l'adattatore luer spingere o avvitare

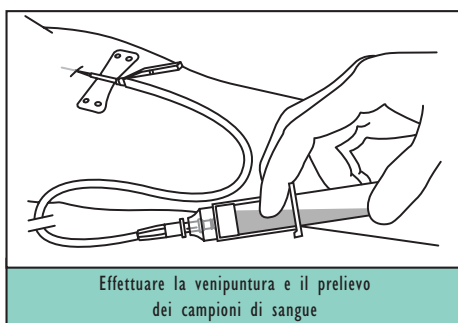


Effettuare la venipuntura e il prelievo dei campioni di sangue

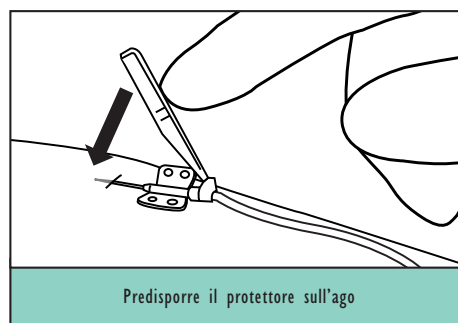


Predisporre il protettore sull'ago




Mantenere il protettore in posizione durante l'estrazione dell'ago

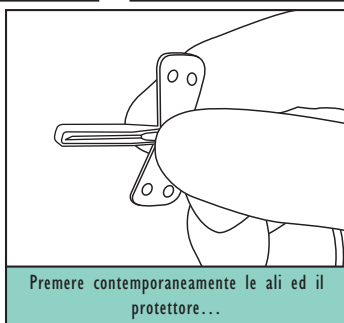

Premere contemporaneamente le ali ed il protettore...

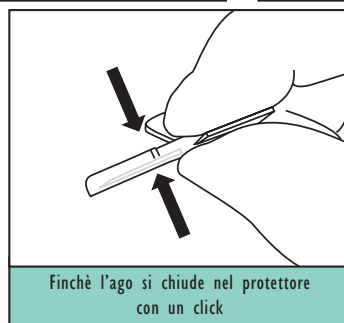

Finchè l'ago si chiude nel protettore con un click

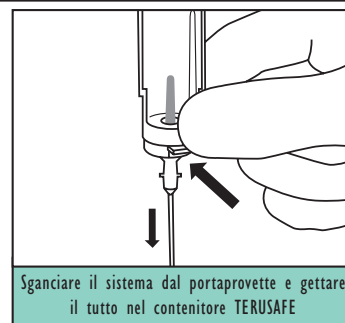

Sganciare il sistema dal portaprovette e gettare il tutto nel contenitore TERUSAFE

RIFERIMENTI SURSHIELD

CE 0123

I campioni biologici e gli strumenti taglienti per la raccolta ematica in particolare, devono essere considerati potenzialmente infettivi e devono quindi essere maneggiati con cura. Tutte le istruzioni importanti per l'impiego così come le prassi e le procedure in uso presso la vostra struttura devono essere osservate scrupolosamente. Non incappucciare mai aghi già usati, ma gettarli negli opportuni contenitori approvati per il rischio biologico.

ARTICOLO	MODELLO	CODICE	CARATTERISTICHE	SCADENZA	
	CONNESSIONE QUICK FIT	MN*SVS21BQ30	ago 21G, tubo di 30 cm	36 mesi	
		MN*SVS21BQ18	ago 21G, tubo di 18 cm	36 mesi	
		MN*SVS21BQ09	ago 21G, tubo di 9 cm	36 mesi	
	CONNESSIONE A VITE	MN*SVS23BQ30	ago 23G, tubo di 30 cm	36 mesi	
		MN*SVS23BQ18	ago 23G, tubo di 18 cm	36 mesi	
		MN*SVS23BQ09	ago 23G, tubo di 9 cm	36 mesi	
	CONNESSIONE A VITE	CONNESSIONE QUICK FIT	MN*SVS21BW30	ago 21G, tubo di 30 cm	36 mesi
			MN*SVS21BW18	ago 21G, tubo di 18 cm	36 mesi
			MN*SVS21BW09	ago 21G, tubo di 9 cm	36 mesi
CONNESSIONE A VITE		MN*SVS23BW30	ago 23G, tubo di 30 cm	36 mesi	
		MN*SVS23BW18	ago 23G, tubo di 18 cm	36 mesi	
		MN*SVS23BW09	ago 23G, tubo di 9 cm	36 mesi	

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro rappresentante di vendita.

TERUMO® è un marchio registrato di TERUMO CORPORATION
SURSHIELD™ è un marchio di TERUMO CORPORATION

TERUMO EUROPE N.V. • Researchpark Zone 2 Haasrode • Interleuvenlaan 40 • B-3001 Leuven • BELGIUM
Tel. +32/16.38.12.11 • Fax +32/16.40.02.49 • www.terumo-europe.com • www.terumo.com

