



SURSHIELD

SEGURIDAD INSTANTÁNEA

KIT PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE CON ALETAS CON EL PROTECTOR SURSHIELD




Gracias a su diseño altamente innovador, el protector SURSHIELD puede ser colocado inmediatamente después de retirar la aguja de la vena del paciente.

El equipo para la toma de muestras de sangre con aletas con el protector SURSHIELD de TERUMO significa un importante paso hacia adelante en la reducción de los riesgos para los profesionales y los pacientes.

We keep life flowing
TERUMO[®]








CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

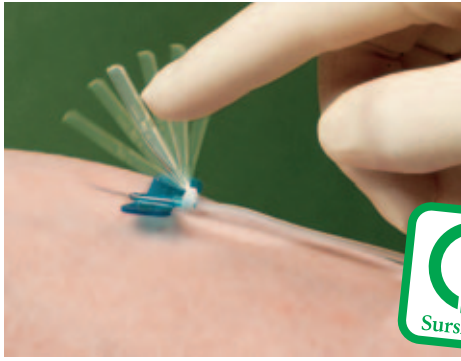

Seguridad instantánea ...

Gracias a su diseño exclusivo, el protector SURSHIELD reduce considerablemente el riesgo de lesiones debidas a pinchazos en profesionales y pacientes. El diseño altamente funcional permite que el protector SURSHIELD pueda ser colocado inmediatamente después de retirar la aguja de la vena en una sola acción y con una sola mano. Es muy fácil de usar y no hace falta mucha presión para cerrar el protector con un clic audible. El clic durante el cierre, y la apariencia de la aguja en la ventanilla de inspección, indican claramente la protección irreversible de la aguja. Mientras se aumenta considerablemente la seguridad para el profesional y el paciente, la técnica de toma de muestras de sangre se mantiene exactamente igual. Las aletas con clara indicación de código de color en el equipo para la toma de muestras de sangre con aletas ofrecen una fiabilidad adicional, además de ser muy fáciles de sujetar. De esta manera facilitan la inserción de la aguja en la vena. Los profesionales sanitarios pueden estar seguros de que el equipo para la toma de muestras de sangre con aletas TERUMO dé resultados excelentes en el laboratorio gracias al tubular de gran calidad que no se enrosca ni se dobla durante su uso. En cuanto al paciente, la aguja es muy cómoda y entra fácilmente en la vena gracias a la probada tecnología de las agujas de TERUMO.

INSTRUCCIONES DE USO

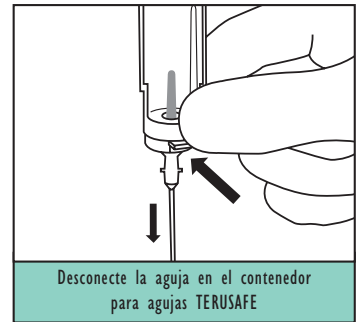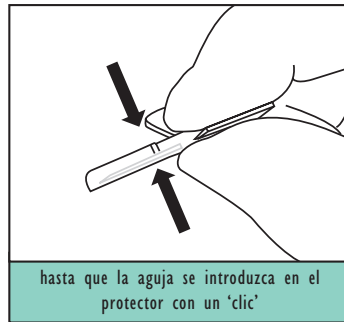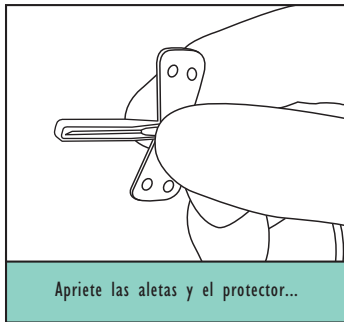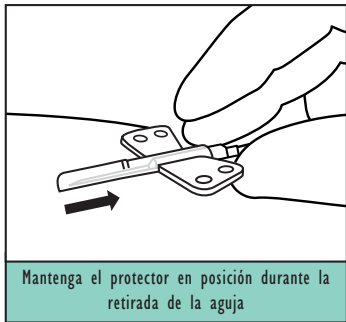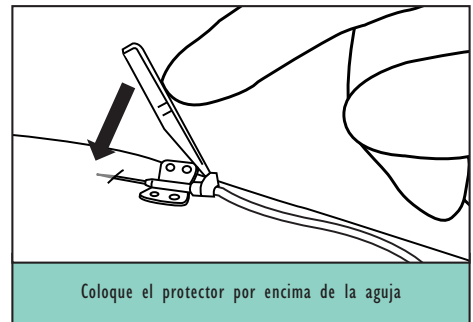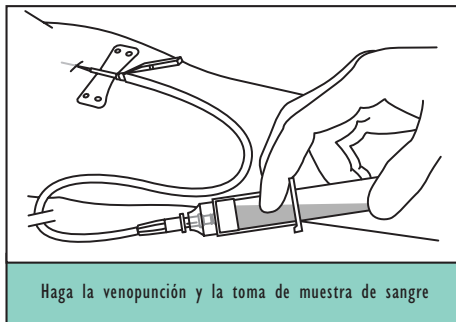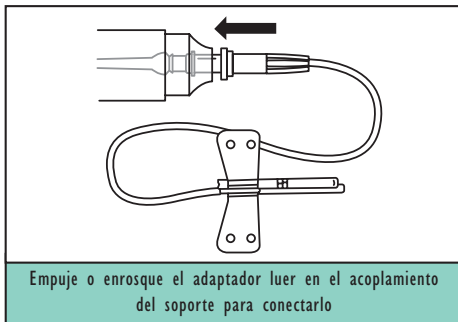

REFERENCIAS SURSHIELD

CE 0123

Deben considerarse las muestras biológicas, y en particular las agujas para toma de muestras de sangre, como potencialmente contagiosas y, desde luego, debe manipularlas con cuidado. Debe respetar todas las instrucciones de uso relevantes, y cumplir meticulosamente con la política y los procedimientos de su unidad. No vuelva a colocar el protector en las agujas usadas, sino tírelas en contenedores aprobados para peligros biológicos.

TIPO DE ARTÍCULO		NÚMERO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL
	ACOPLAMIENTO TIPO BAYONETA	MN*SVS21BQ30	21G, tubos de 30 cm	36 meses
		MN*SVS21BQ18	21G, tubos de 18 cm	36 meses
		MN*SVS21BQ09	21G, tubos de 9 cm	36 meses
	ACOPLAMIENTO DE ROSCA	MN*SVS23BQ30	23G, tubos de 30 cm	36 meses
		MN*SVS23BQ18	23G, tubos de 18 cm	36 meses
		MN*SVS23BQ09	23G, tubos de 9 cm	36 meses
	ACOPLAMIENTO DE ROSCA	MN*SVS21BW30	21G, tubos de 30 cm	36 meses
		MN*SVS21BW18	21G, tubos de 18 cm	36 meses
		MN*SVS21BW09	21G, tubos de 9 cm	36 meses
MN*SVS23BW30		23G, tubos de 30 cm	36 meses	
MN*SVS23BW18		23G, tubos de 18 cm	36 meses	
MN*SVS23BW09		23G, tubos de 9 cm	36 meses	

Para más información, póngase en contacto con nuestro representante comercial.

TERUMO® es una marca registrada de TERUMO CORPORATION
SURSHIELD™ es una marca de TERUMO CORPORATION

TERUMO EUROPE N.V. • Researchpark Zone 2 Haasrode • Interleuvenlaan 40 • B-3001 Leuven • BELGIUM
Tel. +32/16.38.12.11 • Fax +32/16.40.02.49 • www.terumo-europe.com • www.terumo.com

