





QUICK FIT

LA SICUREZZA SENZA COMPROMESSI

La sicurezza in un click

L'innesto a baionetta di progettazione esclusiva per tutti i dispositivi QUICK FIT facilita in maniera considerevole l'inserimento degli aghi. Basta una leggera spinta ed il tipico "click" garantisce la salda connessione del sistema di campionamento per sangue e urine. Dopo l'utilizzo l'ago è estratto senza che vi sia alcun contatto fisico, semplicemente premendo i pulsanti posti lateralmente al portaprovette. Si consiglia l'impiego del SISTEMA QUICK FIT in combinazione con i contenitori TERUMO TERUSAFE.

I contenitori TERUSAFE hanno una particolare apertura di smaltimento che si adatta perfettamente alle dimensioni del portaprovette QUICK FIT. Per gettare immediatamente l'ago, una volta estratto dalla vena, il portaprovette QUICK FIT deve essere semplicemente spinto entro questa apertura e l'ago sarà automaticamente immesso nel contenitore TERUSAFE. Le ferite da puntura d'ago possono essere ridotte significativamente se si lavora con entrambi i dispositivi QUICK FIT e TERUSAFE.

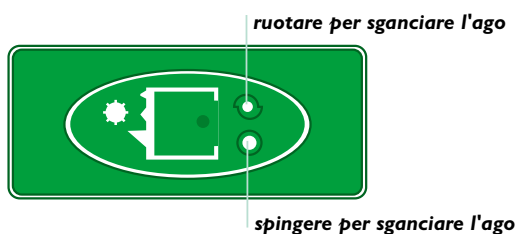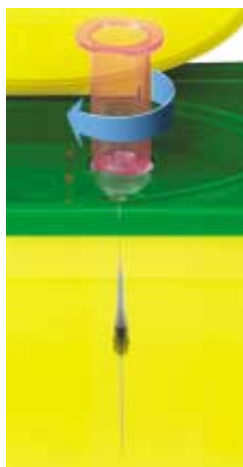

Il campionamento con gli holder QUICK FIT richiede minor tempo rispetto ai convenzionali sistemi ad avvitamento mentre la procedura di campionamento del sangue rimane invariata. Dal momento che il portaprovette QUICK FIT è riutilizzabile per un massimo di 200 utilizzi, è possibile ridurre l'entità complessiva dei rifiuti avendo così un effetto positivo dal punto di vista ambientale. Il sistema QUICK FIT è stato progettato tenendo presente la sicurezza degli utilizzatori e dei pazienti ed integra le eccezionali qualità delle provette VENOSAFE™, e degli aghi VENOJECT®.

Più sicurezza ed efficienza

L'estrema semplicità d'impiego dei dispositivi QUICK FIT consente di velocizzare il processo di raccolta ematica e di ridurre considerevolmente il rischio di ferite da puntura d'ago e può essere considerato, a buona ragione, il sistema di raccolta del sangue più efficiente attualmente esistente sul mercato.

Non occorre imparare nuove procedure

Il campionamento con il portaprovette QUICK FIT è esattamente equivalente all'impiego di un qualsiasi holder di tipo convenzionale.

Più comfort per il paziente e per il prelevatore

Grazie al portaprovette e all'adattatore QUICK FIT Bact/ALERT® la coltura ematica nelle apposite bottiglie e la raccolta del sangue venoso possono essere effettuate con una sola venipuntura.

Meno rifiuti e costi di smaltimento più bassi

I portaprovette QUICK FIT possono essere riutilizzati sino ad un massimo di 200 volte riducendo così il volume di rifiuti e le spese per lo smaltimento.

Al fine di soddisfare meglio la crescente domanda di una raccolta veloce e sicura di campioni di sangue e di urine TERUMO ha ampliato la gamma di prodotti QUICK FIT in maniera considerevole.

Portaprovette riutilizzabile QUICK FIT Rimozione dell'ago con una sola mano

Il rilascio dell'ago può essere fatto premendo i due pulsanti posti lateralmente all'holder QUICK FIT o spingendo il supporto nel foro di sgancio del QUICK FIT TERUSAFE. In questo modo si esclude qualsiasi contatto fisico con l'ago e qualsiasi ferita da puntura accidentale.

Un ago con l'esclusivo innesto a baionetta

L'innesto a baionetta garantisce il bloccaggio sicuro dell'ago e, non essendoci l'avvitamento, il portaprovette QUICK FIT dura più a lungo.

Ago a parete ultrasottile TERUMO

Rappresenta lo standard di riferimento per il settore medico. La parete più sottile dell'ago consente un miglior flusso del sangue che può scorrere con maggior velocità nella provetta mentre la punta acuminata dell'ago a tripla sfaccettatura incide i tessuti in modo meno traumatico.

Contenitori TERUSAFE

I contenitori TERUSAFE sono disponibili in varie dimensioni per lo scarico e lo smaltimento sicuro degli aghi VENOJECT®.

Approvazione TÜV/GS



Portaprovette QUICK FIT BacT/ALERT®

Il portaprovette QUICK FIT BacT/ALERT® è stato appositamente progettato per essere impiegato con le bottiglie per coltura ematica BioMérieux BacT/ALERT®. Una volta effettuato il prelievo per la coltura ematica la bottiglia viene rimossa dalla sua sede, il dispositivo riduttore QUICK FIT BacT/ALERT® viene introdotto nel portaprovette ed il prelevatore può tranquillamente continuare la campionatura del sangue venoso con la serie di provette VENOSAFE™, e VENOJECT®.



Set di campionamento ematico con alette dotato di dispositivo di protezione Surshield e di innesto a baionetta QUICK FIT

Rappresenta la massima soluzione tecnologica per la garanzia di sicurezza. Il suo design altamente innovativo consente di posizionare sull'ago, con un solo movimento della mano ed in maniera istantanea, il dispositivo di protezione "Surshield",



al momento dell'estrazione dell'ago dalla vena del paziente. Dopo di che il set di raccolta ematica può essere gettato nel contenitore TERUSAFE attivando il meccanismo di sgancio QUICK FIT.

Portaprovette QUICK FIT per provette di campionamento delle urine VENOSAFE™

Riassume in sé tutti i vantaggi offerti dal sistema QUICK FIT e si distingue chiaramente dal portaprovette per il campionamento ematico QUICK FIT grazie al colore giallo. Gli aghi a punta tronca QUICK FIT garantiscono un campionamento veloce delle urine e le provette VENOSAFE™ non assorbono le proteine come le provette in plastica di tipo convenzionale.



SISTEMA QUICK FIT

PORTAPROVETTE €

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
XX-VF10HGSQ	PORTAPROVETTE VENOSAFE	40X25



XX-VP10HGSQE	PORTAPROVETTE VENOJECT	40X25
--------------	------------------------	-------



XX-ORGHQ	PORTAPROVETTE BACTALERT	10X10
----------	-------------------------	-------



XX-ORGI	DISPOSITIVO RIDUTTORE BACTALERT	10X10
---------	---------------------------------	-------



XX-VF10HGSQ4	PORTAPROVETTE PER PROVETTA URINE	40X25
--------------	----------------------------------	-------



VENOJECT AGHI MULTIPLI QUICK FIT € 0197

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
MN-2038MQ	0.9 x 40 mm	20x100
MN-2025MQ	0.9 x 25 mm	20x100
MN-2138MQ	0.8 x 40 mm	20x100



MN-2125MQ	0.8 x 25 mm	20x100
MN-2238MQ	0.7 x 40 mm	20x100
MN-2225MQ	0.7 x 25 mm	20x100

AGO PER RACCOLTA URINE

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
UN-2038Q	0.9 x 40 mm (punta tronca)	20x100



ADATTATORE LUER QUICK FIT VENOJECT € 0197

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
XX-MN2000Q		20x100



SET DI CAMPIONAMENTO EMATICO CON ALETTE E DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SURSHIELD € 0197

CODICE	LUNGHEZZA TUBO	CONFEZIONE
MN-SV21Q02	300 mm	16x50
MN-SV23Q02	300 mm	16x50
MN-SV21Q04	180 mm	16x50
MN-SV23Q04	180 mm	16x50
MN-SV21Q05	100 mm	16x50
MN-SV23Q05	100 mm	16x50



SET DI CAMPIONAMENTO EMATICO CON ALETTE € 0197

CODICE	LUNGHEZZA TUBO	CONFEZIONE
MN-SV21Q	300 mm	16x50
MN-SV23Q	300 mm	16x50



I campioni biologici e gli strumenti taglienti per la raccolta ematica in particolare, devono essere considerati potenzialmente infettivi e devono quindi essere maneggiati con cura. Tutte le istruzioni importanti per l'impiego così come le prassi e le procedure in uso presso la vostra struttura devono essere osservate scrupolosamente. Non incappucciare mai aghi già usati, ma gettarli negli opportuni contenitori approvati per il rischio biologico.

LA SICUREZZA SENZA COMPROMESSI:
TERUMO è impegnata nella costante ricerca per lo sviluppo di attrezzature mediche più sicure, più affidabili e più precise.

SEDE IN GIAPPONE

TERUMO CORPORATION
44-1, 2-chome
Hatagaya
Shibuya-ku
Tokyo 151
JAPAN
Tel. +81/3.3374.8111
Fax +81/3.3374.8196

SEDE IN EUROPA, Produzione

TERUMO EUROPE N.V.
Researchpark Zone 2 Haasrode
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32/16.38.12.11
Fax +32/16.40.02.49

TERUMO EUROPE N.V. BENELUX SALES DIVISION

Researchpark Zone 2 Haasrode
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32/16.38.14.02
Fax +32/16.38.15.55

THE NETHERLANDS
Tel. 0800/023.19.38
Fax 0800/022.34.89

LABORATOIRES TERUMO FRANCE S.A.

I, Parc Ariane
Bâtiment Uranus
Rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex
FRANCE
Tel. +33/1.30.96.13.00
Fax +33/1.30.43.60.85

TERUMO (DEUTSCHLAND) GmbH

Lyoner Straße 11 a
60528 Frankfurt am Main
GERMANY
Tel. +49/69.66.44.20
Fax +49/69.66.66.826

TERUMO EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA

Avenida de Burgos 16-D
Edificio EUROMOR
Madrid 28036
ESPAÑA
Tel. +34/91.383.90.69
+34/91.383.91.61
Fax +34/91.767.04.60

TERUMO EUROPE ROME BRANCH

Via Simone Martini 143/145
I-00142 Roma
ITALIA
Tel. +39/06.519.61.420
Fax +39/06.503.04.07

TERUMO EUROPE N.V.

Belgien filial Sverige
Nya Varvet
Byggnad 90
SE-426 71 Västra Frölunda
SWEDEN
Tel. +46/31.748.58.80
Fax +46/31.748.58.90

TERUMO U.K. (Branch of TERUMO EUROPE N.V.)

3 Unity Grove
Off School Lane
Knowsley Industrial Park South
Knowsley
Merseyside
L34 9GT
UNITED KINGDOM
Tel. +44/151.482.4800
Fax +44/151.482.4811

www.terumo-europe.com
www.terumo.com

Publicato da TERUMO EUROPE N.V.

Per altri articoli si prega di contattare i nostri rappresentanti locali

TERUMO® e VENOJECT® sono marchi registrati di TERUMO CORPORATION
SURSHIELD™ è un marchio di TERUMO CORPORATION
VENOSAFE™ è un marchio di TERUMO EUROPE N.V.
BactIALERT® è un marchio registrato di bioMérieux

Every day,
as healthcare
professionals,
you are working
to ensure life
and to contribute
to the well-being
of your patients.
Every day,
TERUMO Europe
provides you
with all the systems
and solutions
for the safe daily
transfer of vital fluids
to keep life flowing.



We keep life flowing

TERUMO®