





QUICK FIT

VEILIGHEID EERST

Veiligheid met één klik

De unieke bajonetsluiting waarmee alle QUICK FIT materiaal is uitgerust, vergemakkelijkt aanzienlijk het aanbrengen van de naald op de houder. Een eenvoudige korte drukbeweging volstaat om de bloed/urine afnamaald stevig vast te zetten op de houder. Bij goed vastzetten zal de sluiting hoorbaar klikken. Na gebruik wordt de naald, zonder aanraken, veilig verwijderd door op de knoppen aan de zijkant van de houder te drukken. Wij raden aan het QUICK FIT systeem in combinatie met de

TERUMO TERUSAFE naaldcontainers te gebruiken. De TERUSAFE naaldcontainers zijn uitgerust met een speciale afwerpopening, aangepast aan de afmetingen van de QUICK FIT houder. Om de naald veilig af te werpen, volstaat het de QUICK FIT houder gewoon in deze afwerpopening te duwen. De naald wordt dan automatisch in de TERUSAFE naaldcontainer gedeponeerd. Dankzij deze QUICK FIT – TERUSAFE combinatie wordt het risico op prikverwondingen aanzienlijk verkleind.

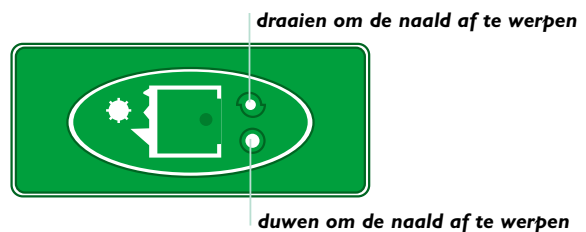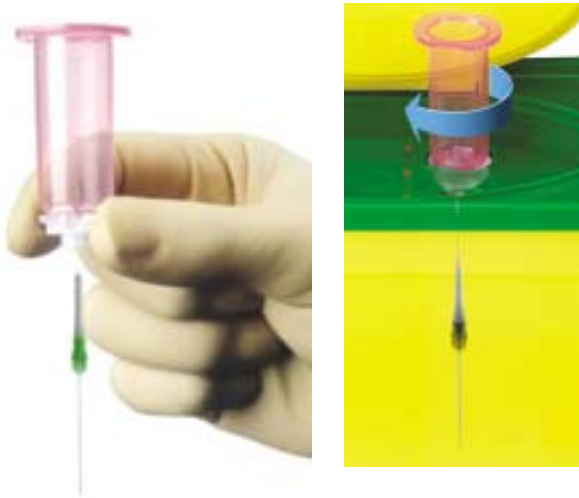

Het nemen van bloed- of urinestalen met een QUICK FIT houder neemt minder tijd in beslag dan met conventionele schroefsystemen, terwijl de bloedafname procedure exact dezelfde blijft. De QUICK FIT houder kan tot 200 keer opnieuw gebruikt worden, waardoor de totale afvalhoeveelheid gereduceerd wordt. De QUICK FIT houder is bijgevolg milieuvriendelijk. Het QUICK FIT systeem is ontworpen met aandacht voor het comfort van gebruikers en patiënten en sluit perfect aan bij de hoogwaardige VENOSAFE™ en VENOJECT® buizen en naalden.

Verhoogde veiligheid en efficiëntie

Daar het QUICK FIT systeem zeer gebruiksvriendelijk is, een vlotte, snelle bloedafname mogelijk maakt en het risico van prikverwondingen aanzienlijk verkleint, kan het beschouwd worden als het meest rendabele bloedafnamesysteem op de markt.

Geen nieuwe procedures

Het afnemen van bloedstalen met het QUICK FIT systeem gebeurt op exact dezelfde wijze als met om het even welke conventionele houder.

Verhoogd comfort voor patiënt en de bloedafnemer

Met de QUICK FIT BacT/ALERT® houder en inzetstuk, kunnen hemocultuurflessen en veneuze bloedstalen afgenomen worden via éénzelfde venapunctie.

Minder afval en minder kosten

De QUICK FIT houders kunnen tot 200 keer opnieuw gebruikt worden, waardoor de hoeveelheid afval en de afvalverwerkingskosten verminderd worden.



Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar een veilige en handige bloedafname en urine staalname heeft TERUMO zijn QUICK FIT gamma aanzienlijk uitgebreid.

Herbruikbare QUICK FIT houder Verwijdering met slechts één hand

De naald kan afgeworpen worden door op de twee knoppen aan de zijkant van de QUICK FIT houder te drukken of door de houder in de TERUSAFE QUICK FIT afwerpopening te duwen. Op deze manier wordt fysiek contact met de naald uitgesloten en worden prikongevallen vermeden.



Naald met unieke bajonetsluiting

De bajonetsluiting zorgt ervoor dat de naald veilig vastzit. Het eenvoudig inklikken in één stap voorkomt dat de QUICK FIT houder afslijt.

TERUMO: naald met ultradunne wand

Vormt de kwaliteitsstandaard in de medische wereld. De dunnere naaldwand zorgt ervoor dat het bloed gemakkelijker en vlugger in de buis loopt, terwijl de scherpe dubbel afgeschuinde naaldpunt weefselbeschadiging tot een minimum beperkt.



TERUSAFE naaldcontainers

De TERUSAFE naaldcontainers, voor een veilige verwijdering van de VENOJECT® naalden, zijn in verschillende formaten verkrijgbaar.

Voorzien van het TÜV/GS-keurmerk



QUICK FIT BacT/ALERT® houder

De QUICK FIT BacT/ALERT® houder is speciaal ontworpen voor gebruik met de bioMérieux BacT/ALERT® hemocultuurflessen. Na de bloedafname wordt de fles uit de houder verwijderd, het QUICK FIT BacT/ALERT® inzetstuk in de houder gestoken en kunnen veneuze bloedstalen afgenomen worden in VENOSAFE™ en/of VENOJECT® buizen.



Bloedafnamesets met Surshield protector en QUICK FIT bajonetsluiting

De ultieme oplossing voor veiligheid; dankzij een zeer vernieuwend design kan de "Surshield" protector; onmiddellijk nadat de naald uit de ader van de patiënt verwijderd is, met één enkele handbeweging over de naald
aangebracht worden. Daarna kan met het QUICK FIT-mechanisme de bloedafnameset veilig in een TERUSAFE naaldcontainer gedeponneerd worden.



QUICK FIT houder voor VENOSAFE™ urinebuizen

Heeft alle voordelen van het QUICK FIT systeem en is dankzij de gele kleuraanduiding duidelijk te onderscheiden van de QUICK FIT houders voor bloedafname. De stompe QUICK FIT urinenaalden garanderen een vlotte urinestaalname. Absorptie van proteïnen zoals dat bij conventionele plastic buizen kan voorkomen is afwezig bij de QUICK FIT urinenaalden.



QUICK FIT SYSTEEM

HOUDERS

CODE	BESCHRIJVING	VERPAKKING
XX-VF10HGSQ	VENOSAFE HOUDER	40X25



XX-VP10HGSQE	VENOJECT HOUDER	40X25
--------------	-----------------	-------



XX-ORGHQ	BACTALERT HOUDER	10X10
----------	------------------	-------



XX-ORGI	BACTALERT INZETSTUK	10X10
---------	---------------------	-------



XX-VF10HGSQ4	VENOSAFE HOUDER VOOR URINEBUIS	40X25
--------------	--------------------------------	-------



VENOJECT MULTI-SAMPLE NAALDEN

CODE	BESCHRIJVING	VERPAKKING
MN-2038MQ	0.9 x 40 mm	20x100
MN-2025MQ	0.9 x 25 mm	20x100
MN-2138MQ	0.8 x 40 mm	20x100



MN-2125MQ	0.8 x 25 mm	20x100
MN-2238MQ	0.7 x 40 mm	20x100
MN-2225MQ	0.7 x 25 mm	20x100

URINE SAMPLER

CODE	BESCHRIJVING	VERPAKKING
UN-2038Q	0.9 x 40 mm (stomp)	20x100



VENOJECT LUER-ADAPTOR

CODE	BESCHRIJVING	VERPAKKING
XX-MN2000Q		20x100



BLOEDAFNAMESET MET VLEUGELNAALD EN SURSHIELD PROTECTOR

CODE	TUBING	VERPAKKING
MN-SV21Q02	300 mm	16x50
MN-SV23Q02	300 mm	16x50
MN-SV21Q04	180 mm	16x50
MN-SV23Q04	180 mm	16x50
MN-SV21Q05	100 mm	16x50
MN-SV23Q05	100 mm	16x50



BLOEDAFNAMESET MET VLEUGELNAALD

CODE	TUBING	VERPAKKING
MN-SV21Q	300 mm	16x50
MN-SV23Q	300 mm	16x50



Alle biologische stalen en gebruikt afnamemateriaal, naalden in het bijzonder, dienen als mogelijk besmet beschouwd te worden en moeten steeds voorzichtig gehanteerd worden. Alle relevante instructies voor het gebruik alsook de leidraden en voorschriften van de organisatie waarvoor men werkt dienen nauwkeurig gevolgd te worden. Gebruikte naalden worden nooit opnieuw van een protector voorzien, maar verwijderd in speciaal ontworpen containers voor biologisch afval.

VEILIGHEID EERST:

TERUMO streeft er voortdurend naar medisch materiaal te ontwikkelen dat veiliger, betrouwbaarder en nauwkeuriger is.

HOOFDKANTOOR JAPAN

TERUMO CORPORATION
44-1, 2-chome
Hatagaya
Shibuya-ku
Tokyo 151
JAPAN
Tel. +81/3.3374.8111
Fax +81/3.3374.8196

HOOFDKANTOOR EUROPE, Fabrikant

TERUMO EUROPE N.V.
Researchpark Zone 2 Haasrode
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32/16.38.12.11
Fax +32/16.40.02.49

TERUMO EUROPE N.V. BENELUX SALES DIVISION

Researchpark Zone 2 Haasrode
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32/16.38.14.02
Fax +32/16.38.15.55

THE NETHERLANDS
Tel. 0800/023.19.38
Fax 0800/022.34.89

LABORATOIRES TERUMO FRANCE S.A.

I, Parc Ariane
Bâtiment Uranus
Rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex
FRANCE
Tel. +33/1.30.96.13.00
Fax +33/1.30.43.60.85

TERUMO (DEUTSCHLAND) GmbH

Lyoner Straße 11 a
60528 Frankfurt am Main
GERMANY
Tel. +49/69.66.44.20
Fax +49/69.66.66.826

TERUMO EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA

Avenida de Burgos 16-D
Edificio EUROMOR
Madrid 28036
ESPAÑA
Tel. +34/91.383.90.69
+34/91.383.91.61
Fax +34/91.767.04.60

TERUMO EUROPE ROME BRANCH

Via Simone Martini 143/145
I-00142 Roma
ITALIA
Tel. +39/06.519.61.420
Fax +39/06.503.04.07

TERUMO EUROPE N.V.

Belgien filiaal Sverige
Nya Varvet
Byggnad 90
SE-426 71 Västra Frölunda
SWEDEN
Tel. +46/31.748.58.80
Fax +46/31.748.58.90

TERUMO U.K. (Branch of TERUMO EUROPE N.V.)

3 Unity Grove
Off School Lane
Knowsley Industrial Park South
Knowsley
Merseyside
L34 9GT
UNITED KINGDOM
Tel. +44/151.482.4800
Fax +44/151.482.4811

www.terumo-europe.com
www.terumo.com

Gepubliceerd door TERUMO EUROPE N.V.

Voor meer informatie, gelieve onze plaatselijke vertegenwoordigers te contacteren

TERUMO® en VENOJECT® zijn geregistreerde handelsmerken van TERUMO CORPORATION
SURSHIELD™ is een handelsmerk van TERUMO CORPORATION
VENOSAFE™ is een handelsmerk van TERUMO EUROPE N.V.
BactIALERT® is een geregistreerd handelsmerk van bioMérieux

Elke dag ben je er als medewerker in de gezondheidszorg mee bezig, levens te redden, draag je bij tot het welzijn van je patiënten. Elke dag, voorziet **TERUMO Europe** je van alle systemen en oplossingen voor een veilige overbrenging van vitale vloeistoffen om de levensstroom vloeiende te houden.



We keep life flowing

TERUMO®